

침대저울

UNDER BED SCALE

사용용도 및 사용방법

- 신부전증 환자 투석 시 체중 측정용
투석기 오류 검정용
- 체중 변화 검정용— 실시간 감시
- 침대 바퀴에 끼워 사용

특징

- 시작체중과 종료체중, 체중변화량을 실시간으로 모두 표시
- 두랄루민으로 제작되어 가볍고 이동이 간편
- PC와 연결시 체중의 변화가 실시간으로 GRAPH로 표시됨 (OPTION)




SPECIFICATIONS

제품명	STUBS- II
최대중량	600kg
정밀도	0.1kg
재질	두랄루민
중량	약 2.8 kg X 4 EA = 11.2 kg
규격	240(W) x 177(D) x 143 (H)mm(측정부 높이 25mm)

사용법

- 침대 바퀴에 끼워 사용

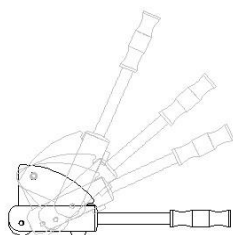

- bed lift 기능(침대에 손을 대지 않고 침대바퀴에 설치하는 기능)

