

XC63 series

Moisture Analysers


XC63은 뛰어난 성능과 심플한 키로서 안정적인 데이터를 구현하며 막대형 할로겐램프 가열방식으로 가열시간 절약과 효율적 측정이 가능합니다.
또 대형접시로 다량의 제품을 측정하는것이 가능하며, 다양한 현장에서 사용할수 있다는 것이 이 제품의 가장 큰 장점 입니다.



단순한 키, 쉬운작동법
큰 접시 사이즈(Ø95)
할로겐 램프
컴팩트한 디자인
백라이트 LCD화면



막대형 할로겐램프

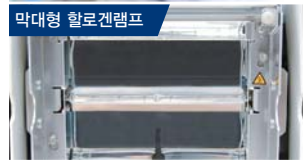

대형 접시 사이즈



심플한 키패드



QR코드를 스캔하시면
더 많은 제품을 보실 수 있습니다.



CAS

XC63 series | Moisture Analysers

제품특징

- 단순한 키, 쉬운 작동법
- 큰 접시 사이즈(Ø95)
- 막대형 할로겐 램프
- 컴팩트한 디자인
- 백라이트 LCD화면



막대형 할로겐 램프

할로겐 가열방식을 사용하여 기존의 적외선 방식보다 시간을 40%까지 단축할 수 있으며 보다 정확한 측정이 가능합니다.



대형접시 사용

대형접시 사용으로 많은양의 제품을 담아 측정하는 것이 가능합니다.



심플한 키패드

심플한 디자인과 간단한 조작으로 손쉽게 사용할 수 있으며, 사용자의 편의를 위한 효율적인 작업을 지원합니다.



다양한 산업현장에서 사용가능

음식, 환경, 화학, 제약 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용할 수 있는 제품으로서 그외에도 다양한 환경에서 응용이 가능합니다.

제품사양

Model	XC63
최대표시(g)	60
최소중량표시(g)	0.02
수분율 최소표시	0.001g
	0.01/0.1%(Selectable)
	0.15%(2g)
수분율 허용오차	0.05%(5g)
	0.02%(10g)
가열방식	막대형 할로겐램프
사용전원	220V AC 50/60Hz
가열온도범위	50 ~ 200°C(1°C씩 증가)
	(180°C가 초과될시 시간제한)
표시부	LCD(백라이트 포함)
팬크기(mm)	Ø95
제품크기(mm)	202(W) x 336(L) x 157(H)
제품무게(kg)	4

Model	XC63
작동온도&온도범위	5~40°C, 85%RH(상대습도)이거나 낮음
측정 모드	표준 건조 (쉬운 시작/자동 종료/시간 종료)
	빠른 건조 (쉬운 시작/자동 종료/시간 종료)
	느린 건조 (쉬운 시작/자동 종료/시간 종료)
	단계 건조 (쉬운 시작/자동 종료/시간 종료)
	타이머 설정 1~120 분으로 설정 또는 그 이상도 가능 (최대 12시간)
인터페이스	RS-232C(9Pin 커넥터), I/O 포트
	USB 포트
측정상태 데이터메모리	10
데이터메모리	100
온도 조정 키트	OPTION

선택할 수 있는 악세서리

- 프린터 EP-80
- 프린터 EP-90
- 디스플레이 보호덮개(5세트)
- 알루미늄 시트
- 섬유 유리 시트
- 프린터 CP-7020
- 온도 조정 키트
- 샘플접시(SUS)
- RS-232C 케이블
- USB 연결 케이블
- 대체 할로겐 램프

제품크기

